

Gymna ShockMaster 300

Terapia a onde d'urto radiali,
sempre, disponibili ovunque.



Gymna ShockMaster 300

La terapia a onde d'urto radiali è un trattamento riconosciuto e affermato. Grazie alla soluzione portatile ShockMaster 300 è ora possibile eseguire trattamenti ovunque e in qualsiasi momento. Non ci sono limitazioni, basta avviare la macchina e si è pronti per iniziare: plug and play.



Soluzione portatile

È possibile portare l'apparecchio dove si vuole

- Design compatto e leggero: facile da installare
- Compressore d'aria incorporato: non occorre manutenzione

Comfort

Condizioni di lavoro ideali e massima attenzione per il paziente

- Perfetta angolazione di visualizzazione per voi e i vostri pazienti
- Pad protettivo: per poter posare il manipolo in modo sicuro e facile
- Compressore d'aria silenzioso: comunicazione ottimale tra terapeuta e paziente






Gymna ShockMaster

La soluzione terapeutica
a onde d'urto radiali.

Principio di funzionamento

Un proiettile a movimentazione rapida trasferisce la propria energia sull'applicatore. Ciò genera delle onde d'urto che si diffondono e vengono assorbite dalla zona del corpo interessata.

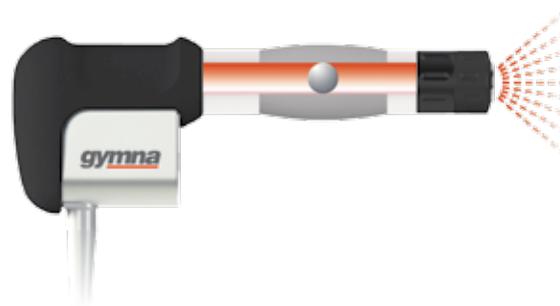

Effetti


- Riduzione del dolore immediata ed evidente
- Miglioramento della mobilità
- Eliminazione di fibrosi e calcificazione
- Stimolazione del metabolismo

Vantaggi

- La terapia ideale per le patologie muscoloscheletriche complesse e croniche
- Tasso di riuscita dell'80%
- Terapie di breve durata: circa 10 minuti
- Bastano dalle 6 alle 8 sedute di trattamento
- Alternativa realistica all'intervento chirurgico
- Potenziamento dei trattamenti da offrire ai pazienti



D-ACTOR applicator

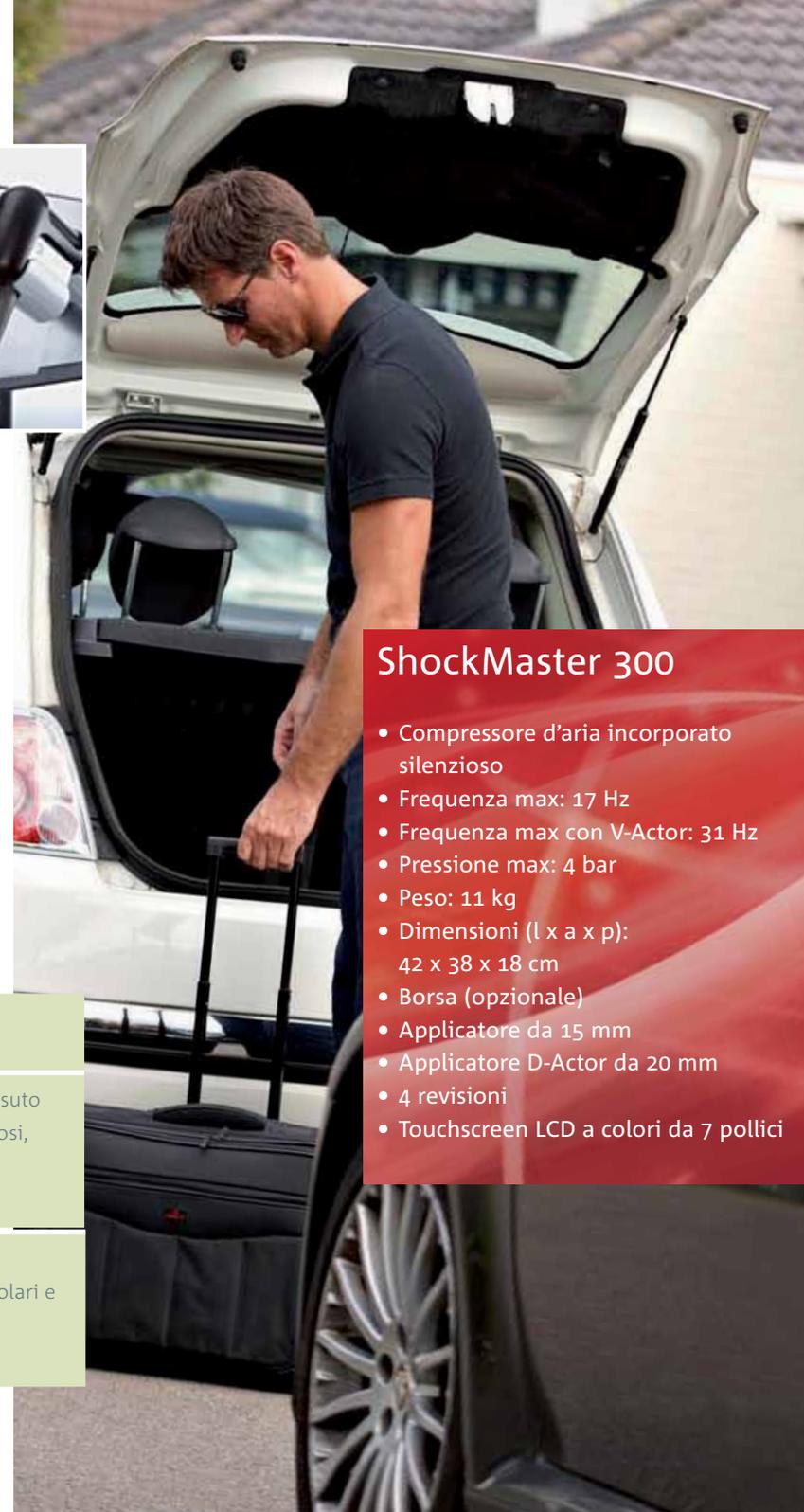

Risparmio di tempo

ShockMaster consente di risparmiare tempo

- Revisione fai da te: risparmio di costi e tempo
- Barra luminosa con diversi colori: chiara indicazione della durata di trattamento
- Pulsanti di grandi dimensioni: modifica dei parametri rapida e facile

	Applicatore standard 15 mm	Onde d'urto radiali	Patologie inserzionali
	Applicatore D-ACTOR 20 mm	Onde d'urto radiali e impulsi vibranti	Trigger point miofasciali, tessuto muscolare e connettivo, fibrosi, zone muscolari profonde
	V-ACTOR	Impulsi vibranti	Localizzato dei trigger point Attivazione dei tessuti muscolari e connettivi circostanti

ShockMaster 300

- Compressore d'aria incorporato silenzioso
- Frequenza max: 17 Hz
- Frequenza max con V-Actor: 31 Hz
- Pressione max: 4 bar
- Peso: 11 kg
- Dimensioni (l x a x p): 42 x 38 x 18 cm
- Borsa (opzionale)
- Applicatore da 15 mm
- Applicatore D-Actor da 20 mm
- 4 revisioni
- Touchscreen LCD a colori da 7 pollici

consultare www.shockmaster.eu per informazioni sui vari applicatori

Indicazioni



Dolore alle spalle con o senza calcificazione
Miglioramento della mobilità



Fasciosi plantare
Miglioramento della resistenza e riduzione del dolore



Trigger point miofasciali
Interruzione delle contrazioni dei sarcomeri continue nella fibra muscolare.
Riduzione di dolore irradiante e locale

Indicazioni

- Gomito del tennista/epicondilita omerale
- Gomito del golfista/epicondilita mediale
- Contrattura di Dupuytren
- Malattia di Ledderhose
- Fasciosi plantare
- Periostite/sindrome tibiale anteriore
- Tendinite rotulea
- Achilodinia
- Sindrome dolorosa miofasciale
- Ecc.

L'investimento migliore che abbia mai fatto!

Gymna ShockMaster



Active Motion

Crioterapia

Onde corte

Elettroterapia

Piattaforme
di vibrazione

Lettimi per
trattamenti



Il vostro concessionario:

gymna[®]

www.gymna.com

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, België

Tel: +32 (0)89 510510 | Fax: +32 (0)89 210513